



INVISIBLEFAST
Aligners

Seu novo sorriso chegou :)

Aqui estão alguns cuidados que você deve tomar ao fazer uso dos Alinhadores Invisíveis.

O que eu não devo fazer utilizando os Alinhadores?



Fazer refeições utilizando o alinhador.



Ingerir líquidos quentes ou com corantes utilizando o alinhador.



Deixar de seguir as demais orientações do(a) dentista.

O que eu posso fazer utilizando os Alinhadores?



Você pode realizar atividades físicas e cotidianas normalmente.



Você pode e deve dormir com o Alinhador.



Compartilhar em suas redes sociais seu novo aparelho invisível.

Cuidados com a higienização do seus Alinhadores.


- 1** Lave apenas com água corrente fria. Sem necessidade do uso de creme dental. Caso necessite, utilize um sem abrasivos.
- 2** Indicamos que a higienização do alinhador seja feita com uma escova de cerdas macias, e que preferencialmente não seja a mesma usada cotidianamente para escovar seus dentes.

- 3** Evite recolocar os alinhadores sem a correta escovação dos dentes: o fato de serem removíveis é, sem dúvidas, uma das melhores vantagens do alinhador, porém, atente-se ao recolocá-los.
- 4** Não deixe de molho em enxaguante bucal ou água quente, isso pode danificar o material do alinhador.
- 5** Evite a perda do Alinhador. Guarde-o no estojo ortodôntico enquanto não estiver em uso.

INVISIBLEFAST
Aligners

Compartilhe seu novo aparelho
invisível com a gente :)

 @invisible_fast

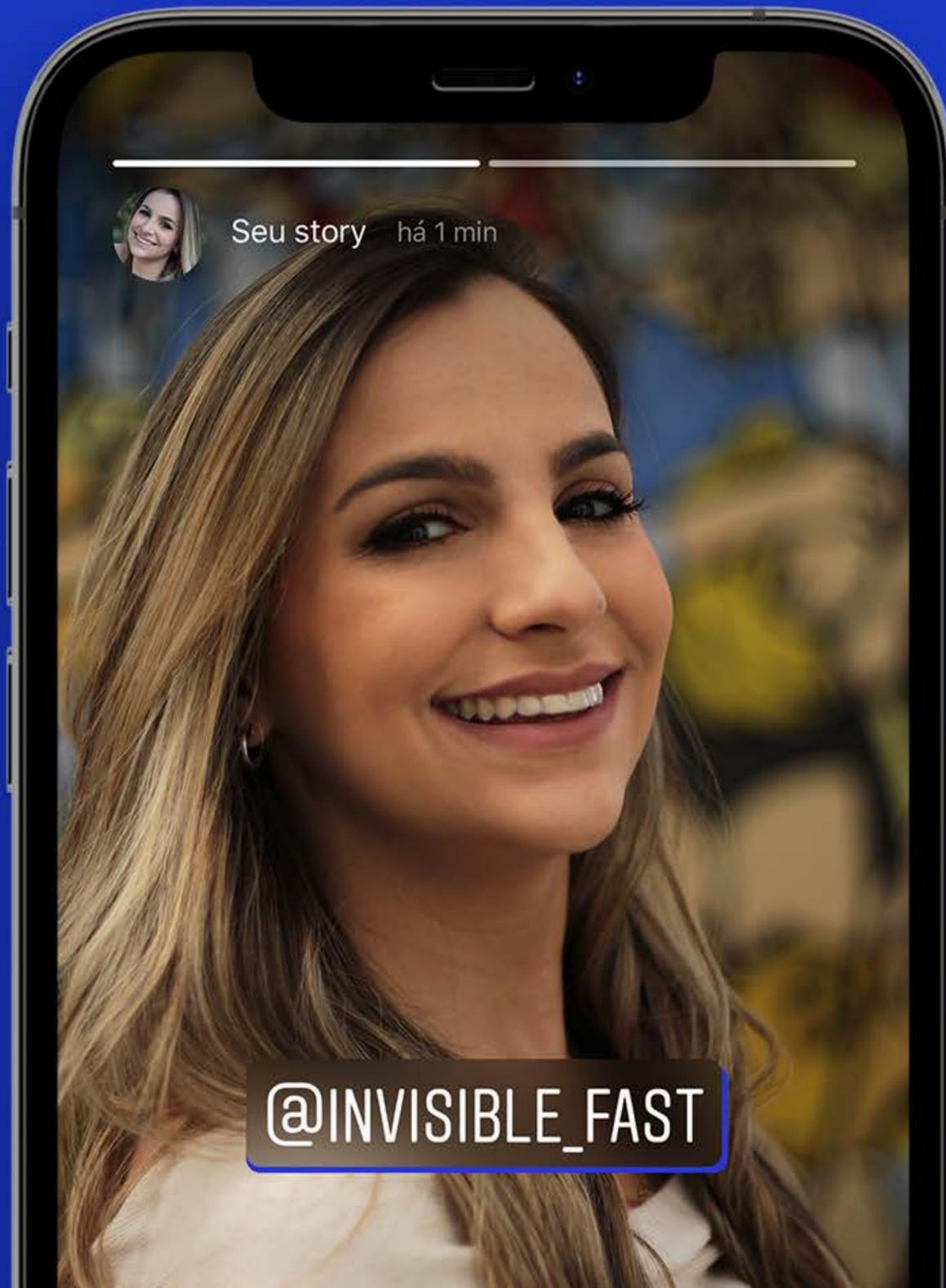



**Para eventuais dúvidas,
contate seu dentista.**

invisiblefast.com

INVISIBLEFAST
Aligners